

# ハイネ オールスペックチップ ディスペンサー 取扱説明書

## 1. 製品概要

本品は、ハイネ オールスペックスペキュラチップ用（ディスポーザブル）のディスペンサーです。  
オールスペックスペキュラチップ（灰色）は、【ベータ 200・K180・アルファ・アルファ+・ミニ 2000・ミニ 2000F.O.・ミニ 3000・ミニ 3000F.O.】耳鏡に対応しています。




注文コード	品番	商品名
136-010-27	B000. 11. 148	HEINE オールスペックスペキュラチップ ディスペンサー

## 2. 組立・設置方法


### 【壁への取付方法】

- 1) 付属の両面テープの片方をはがし、本品の裏面 2 箇所にはり付けます。
- 2) もう片方のテープ面をはがして壁に貼り付けます。

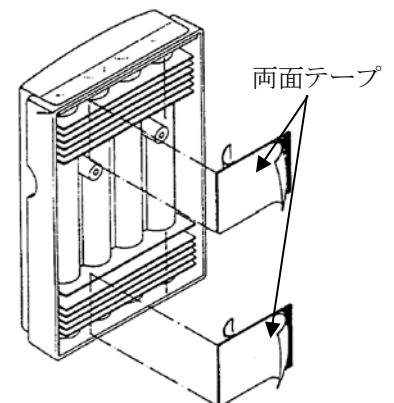

### 【スペキュラチップの装入方法】

- 1) 上蓋の両側面を軽く押しながら手前に引き、上蓋を開けます。
- 2) 図のように包装を開け、上方向からスペキュラチップを装入します。  
このときスペキュラチップ先端部がディスペンサー下面より出ていて、引き抜ける状態であることを確認します。
- 3) 上蓋をカチッと音がするまで押し込んで閉じます。

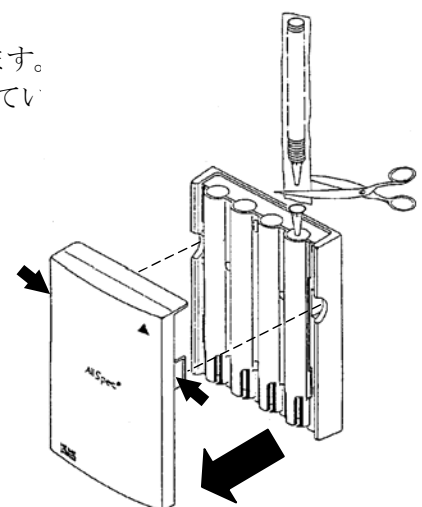

## 3. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp>